



77 Elektronika Kft.



EMPRESA DE
INGENIERÍA
CLÍNICA SRL



LabUReader Plus 2

Analizador de
orina semi-automático.



- Tecnología de medición avanzada y patentada de alta precisión.
- Alta eficiencia y con habilidad.
- Fácil de operar, con entrenamiento mínimo de usuario.
- Inicio automático de medición a través de detector de tiras.
- Posibilidad de ingreso manual de parámetros observables como COLOR y TURBIDEZ y otros comentarios.
- Funciones avanzadas para QC.
- Carga continua de muestras.
- Mantenimiento mínimo.

URINANÁLISIS RÁPIDO Y CONFIABLE

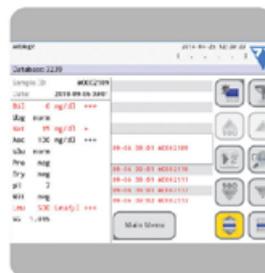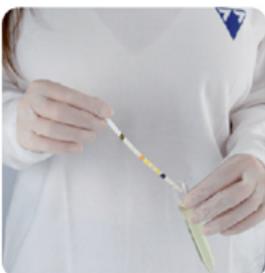

Metodología

Reflectancia (cuatro longitudes de onda 505, 530, 620, 660 nm).

Parámetros evaluados

Bilirrubina, urobilinógeno, cuerpos cetónicos, ácido ascórbico, glucosa, proteínas, glóbulos rojos, pH, nitritos y leucocitos a través de LabStrip U11 Plus urine test strip.

Rendimiento

Hasta 500 test/hora.

Memoria

5000 resultados de muestras y 1000 de QC.

Pantalla

5.7'' LCD VGA pantalla color táctil (resolución: 640x480).

Dimensiones

300x300x170 mm

Peso

6 kg.

Fuente de alimentación

100-240V AC/ 50-60 Hz/ adaptador principal externo.

Interfase

Ethernet puerto serie RS232, USA A USB B, PS2, adaptador WIFI.

Impresora térmica

Incorporada.

Lector de código de barra

Externo opcional.

Teclado externo

Opcional.

Protocolo de comunicación

LIS 2 (ASTM+), HL7.

Condiciones de operación

15-32°C, 20-80 % relativa.



LabStrip U11 Plus

Tamaño del pack
150 test

Vida útil
24 meses